

## Luciferase 活性检测报告

检测细胞：SK-HEP-1-LUC-EGFP

1.

### 2. 实验仪器及耗材

名称	来源	货号
高速冷冻离心机	湘仪	H1850
IVIS Lumina II	精诺真	—
移液器	Thermo	4640050
200 $\mu$ l 吸头	NEST	312001
1.5 ml 离心管	NEST	615601


### 3. 实验试剂

名称	来源	货号
Beetle Luciferin	Promega	E160C

### 4. 实验步骤

- 1) 消化下细胞并计数，将之重悬为  $10^5$ /mL，取 100  $\mu$ L 加入 96 孔化学发光板，并梯度稀释，使得每孔细胞数量为 10000 个，5000 个，2500 个。
- 2) 每孔加入 100  $\mu$ L 300 $\mu$ g/mL Beetle Luciferin。
- 3) 2 min 后将板放入 IVIS Lumina II 进行成像。

### 5. 检测结果

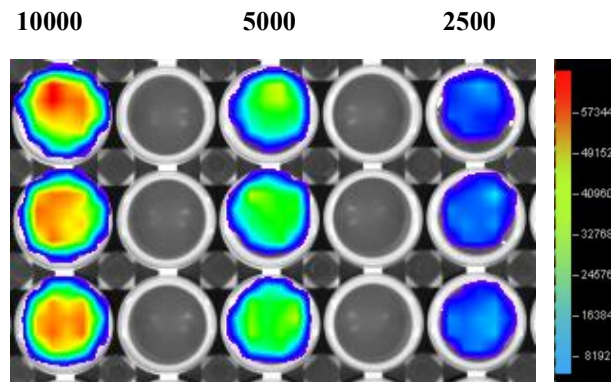

检测日期：2023.02.06

检测人：陈苓苓

网站：www.immocell.com

电话：400-080-3389

邮箱：im@immocell.com

